



REEMPLACEMENT DU BOUTON

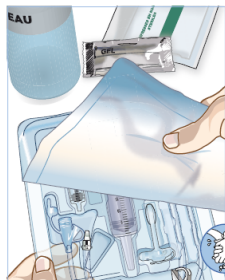


1. PRÉPARATION DU MATÉRIEL

- Eau stérile (hôpital) / minérale (domicile)
- Gel hydrosoluble (pour lubrifier le bouton)
- Un kit MIC-KEY®

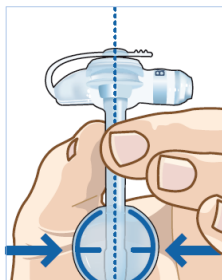


2. INTÉGRITÉ NOUVEAU BOUTON

Contrôler avec de l'eau la présence de fuite au niveau du ballonnet en connectant la seringue sur le site "BAL".

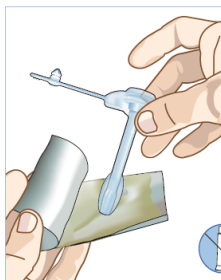


3. LUBRIFICATION

Lubrifier le bouton à l'eau ou à l'aide d'un gel hydrosoluble.

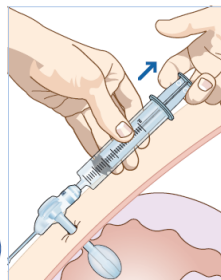


4. RETRAIT DU BOUTON

Connecter la seringue sur le site "BAL" pour dégonfler le ballonnet et retirer le bouton en place.

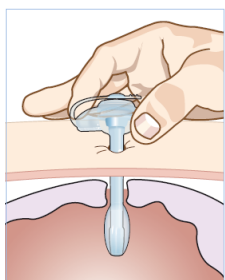


5. INTRODUCTION DU BOUTON

Introduire le nouveau bouton dans la stomie sans forcer.

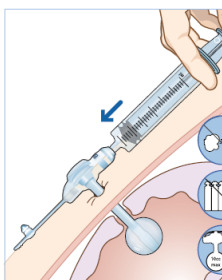

6. GONFLEMENT DU BALLONNET

Connecter la seringue remplie avec 3 à 5ml d'eau sur le site "BAL" et gonfler le ballonnet.

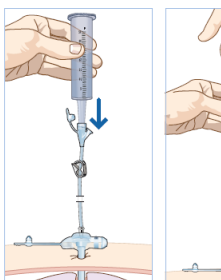

7. VÉRIFICATION DU BON POSITIONNEMENT

PAR GRAVITÉ
en visualisant la baisse du niveau d'eau dans la seringue via le prolongateur

OU PAR ASPIRATION
du contenu gastrique avec une seringue via le prolongateur connecté au bouton

OU À LA RADIOLOGIE
si anomalie lors de la pose

RECOMMANDATIONS

Ne jamais utiliser de produits à dérivés pétroliers ou à corps gras.

Ne pas gonfler le ballonnet avec du sérum physiologique.

Ne jamais gonfler le ballonnet avec de l'air.

Des volumes importants fragilisent le ballonnet (maximum 10ml).

FREQUENCE DE CHANGEMENT : 2 A 4 fois par an voir plus en cas de besoin.



LA GASTROSTOMIE : VIE QUOTIDIENNE

Médecin :

Infirmière

Infirmière stomathérapeute :

Tél :

Email :

Établissement / Adresse



Fiche Gastrostomie Vie Quotidienne - v3 0511

Asept InMed

Essentiellement simple...et tout simplement Essentiel

www.aseptinmed.fr

En partenariat avec :
Brigitte CYRILLE Infirmière Stomathérapeute
Florence LIEBERT Infirmière Coordinatrice
Dr Jérôme VIALA Gastroentérologue
Hôpital ROBERT DEBRE
Tél. : 01.40.03.20.00

Asept InMed

Essentiellement simple...et tout simplement Essentiel

www.aseptinmed.fr

En partenariat avec :
Brigitte CYRILLE Infirmière Stomathérapeute
Florence LIEBERT Infirmière Coordinatrice
Dr Jérôme VIALA Gastroentérologue
Hôpital ROBERT DEBRE
Tél. : 01.40.03.20.00

NUTRITION PAR POMPE

• LA POMPE



• LA POSE



- > Purger la tubulure.
- > Connecter la tubulure à la sonde de gastrostomie.
- > S'assurer de la bonne fixation de la tubulure—sonde.
- > Programmer la pompe.
- > Déclamper la sonde.
- > Mettre la pompe en fonction.



• LE DEBRANCHEMENT

- > Rincer la sonde à l'aide de la seringue (eau en bouteille).
- > Clamper la tubulure.
- > Arrêter la pompe.
- > Déconnecter la tubulure.

LES SOINS QUOTIDIENS

Avant toute manipulation, respecter les règles d'hygiène simples. Lavez-vous les mains de façon à éviter toute contamination.

• AUTOUR DE LA STOMIE

- > Maintenir la peau propre et sèche autour du site de stomie .
- > Examiner la stomie et la zone cutanée qui l'entoure après chaque alimentation.
- > Nettoyer la peau autour du site de gastrostomie à l'eau savonneuse. Rincer puis sécher ensuite soigneusement.

Laisser la stomie à l'air libre favorise la cicatrisation.

LES SOINS QUOTIDIENS (suite)

• AUTOUR DE LA SONDE

- > Tourner la sonde tous les jours.
- > Avant et après chaque administration de nutriments et/ou de médicaments rincer à l'aide d'une seringue d'eau afin de faciliter leur passage et d'éviter tout résidu dans la sonde.

• AUTOUR DU BALLONNET

- > S'assurer que le ballonnet est bien gonflé par une légère traction sur la sonde.
- > Si déplacement exagéré de la sonde, vérifier le volume de gonflage du ballonnet.

QUE FAIRE SI ?

→ présence d'écoulement purulent et/ou d'inflammation

- Désinfection 2 fois par jour avec un antiseptique
- Si absence d'amélioration au bout de 48h, contacter votre médecin.

→ présence de rougeurs, d'irritations

Cela peut être le signe d'une fuite de liquide gastrique acide.

- Vérifier le volume de gonflage du ballonnet.
- Nettoyer à l'eau savonneuse et sécher fréquemment cette zone.

→ bourgeon

- Contacter le service.

→ fièvre >38°

- Surveiller la température régulièrement.
- Si persistance de la fièvre, contacter votre médecin.

→ nausées, vomissements ou diarrhée

- Appeler le service référent.

→ sonde bouchée

- Injecter de l'eau tiède dans la sonde.
- Si échec, contacter le service référent pour un éventuel changement de sonde.

→ sonde ou bouton enlevé accidentellement

- Si possible, mettre une sonde ou un bouton de même diamètre en place rapidement.
- Contacter rapidement le service référent.